


TBT Turbo 快速半干转印系统

产品特点

- **高通量·双独立运行**
支持 4 块小胶 / 2 块中型胶；双转印盘设计，可同时运行 2 个独立程序（155 × 110 mm/ 盘）
- **极速转印**
3 分钟完成 2 块小胶，7 分钟完成 4 块小胶或 2 块中型胶
- **高效散热·稳定可靠**
高效风道快速散热，低温运行，避免烧膜，提升结果稳定性（专利号 ZL202120258230.3）
- **操作便捷**
支持即用型耗材包（可选），无需配液与预处理
- **内置电源·精准控制**
集成电源：0-26 V / 0-2.6 A，精细可调，适配多种实验条件
- **智能交互**
5 英寸触控屏，可存储及调用 9 组历史运行程序，运行自动监控
- **均一转印·专利电极**
卡扣锁紧 + 弹簧压紧设计，确保压力与电场均一（专利号：ZL202120261037.5）
- **灵活开放**
兼容各种凝胶类型和浓度比例

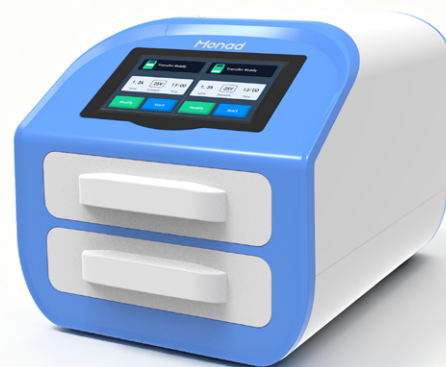

配置参数

货号	PE60401	型号	TBT Turbo
名称	快速半干转印系统	英文名称	Semi-dry Transfer System
转印盘	2 个	通量	4 块小胶或 2 块中胶
程序存储	9 组	程序	2 个转印盘独立运行
转印面积	155×110 mm	控制模式	恒压 / 恒流
电流	0-2.6A（步进 0.1 A）	电压	0-26V（步进 1 V）
尺寸（W×D×H）	220×290×200 mm	屏幕	5 英寸电容触摸屏
重量	4 Kg		

订购信息

货号	名称	描述	规格
PE60401	TBT Turbo Transfer System	快速半干转印系统	1/set
PEA6039	主机（快速半干转印系统）	PE60401 标配	1/pk
PEA6040	抽屉上盖	PE60401 标配，可单独购买	2/pk
PEA6041	抽屉下壳	PE60401 标配，可单独购买	2/pk
PEA6042	5× 转膜液	PE60401 标配，可单独购买	1/pk
PEA6043	转印滤纸	PE60401 标配，可单独购买	1/pk
PEA6044	转印滚筒	PE60401 标配，可单独购买	1/pk

400-928-3698

莫纳（苏州）生物科技有限公司
Monad (Suzhou) Biotech Co., Ltd.

江苏省苏州市工业园区杏林街 78 号 13A 栋
E-mail: support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com

